

Instruções para autoinjeção subcutânea

Caneta pré-cheia descartável SureClick® AMGEVITA®

Com a caneta pré-cheia SureClick®, pode proceder à sua própria injeção de AMGEVITA® em casa.

Importante:

Utilize sempre este medicamento exatamente conforme indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Antes da aplicação, tenha em consideração o seguinte:

- ✓ Administre a injeção apenas se o seu médico ou os profissionais de saúde já lhe tiverem mostrado como proceder à autoinjeção.
- ✓ Guarde a caneta pré-cheia no frigorífico à temperatura entre 2 e 8 °C.
- ✓ Não utilize uma caneta pré-cheia, se esta tiver caído sobre uma superfície dura. Partes da caneta pré-cheia podem estar danificadas, mesmo que não se detetem quaisquer danos.
- ✓ Lave minuciosamente as mãos com água e sabão.

Prepare o seguinte:

- ✓ Uma caneta pré-cheia nova
- ✓ Gaze com álcool
- ✓ Bola de algodão ou gaze
- ✓ Penso rápido
- ✓ Recipiente imperfurável


Passo 1: Retire uma caneta pré-cheia de AMGEVITA® da embalagem

Cerca de 15 a 30 minutos antes da injeção, coloque cuidadosamente a caneta pré-cheia fora da caixa em posição vertical, para que possa atingir a temperatura ambiente. Ponha novamente no frigorífico a embalagem original de canetas pré-cheias de AMGEVITA® não usadas.

Nunca

- coloque a caneta pré-cheia novamente no frigorífico se já se encontrar à temperatura ambiente.
- tente aquecer a caneta pré-cheia utilizando uma fonte de calor como, p. ex., água quente ou um micro-ondas.
- agite a caneta pré-cheia.
- remova a tampa amarela da caneta pré-cheia demasiado cedo.

Passo 2: Controle a caneta pré-cheia de AMGEVITA®

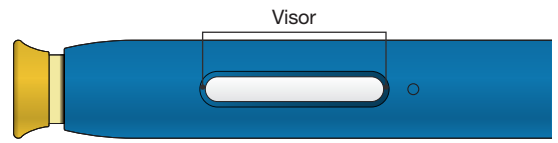


Verifique se o medicamento no visor está transparente e incolor a ligeiramente amarelado. Verifique o prazo de validade.

Não utilize a caneta pré-cheia, se:


- o medicamento estiver turvo ou colorido ou apresentar flocos ou partículas.
- partes do dispositivo se tiverem soltado ou aparecerem partidas.
- a caneta pré-cheia tiver caído sobre uma superfície dura.
- a tampa amarela faltar ou não estiver colocada com segurança.
- o prazo de validade impresso no rótulo tiver expirado.

Utilize em qualquer caso uma caneta pré-cheia nova

Antes da utilização

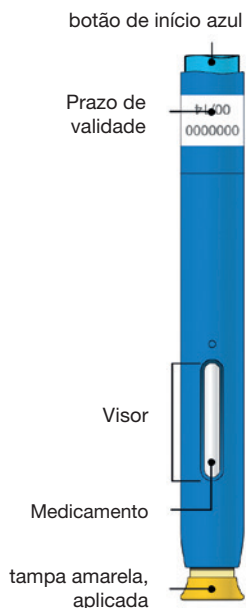


Após a utilização

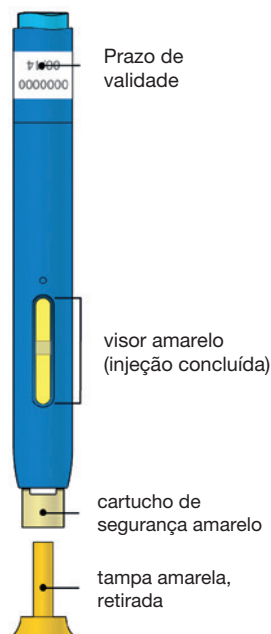

Importante: a agulha está na parte interna.

Passo 3: Prepare e limpe o local de injeção

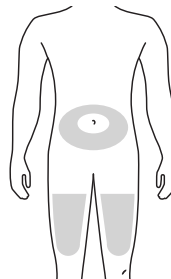

Escolha o local de injeção:


- Abdômen (exceto uma área com cerca de 5 centímetros em redor do umbigo) ou
- Coxas

Desinfete o local de injeção com uma gaze com álcool. Assim que a pele tiver secado, está pronta para a injeção.

Importante:

- Evite tocar novamente no local de injeção antes da injeção.
- Assegure-se de que não administra a injeção no mesmo local que utilizou da última vez.
- Não escolha áreas onde a pele esteja sensível, ferida, avermelhada ou endurecida – evite injetar em áreas com cicatrizes ou estrias.
- Se sofrer de psoríase, evite injetar diretamente em partes da pele salientes, espessas, avermelhadas ou escamosas ou em feridas.

Passo 4: Retire agora a tampa amarela

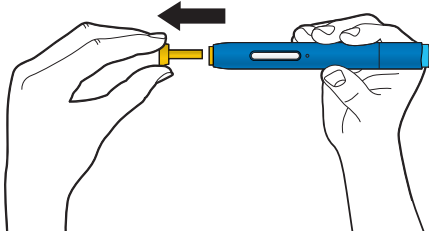


Quando estiver pronto/a para a injeção, puxe cuidadosamente a tampa amarela de proteção da agulha em linha reta e afastada do corpo. É normal que veja uma gota de medicamento na ponta da agulha ou no cartucho de segurança amarelo.

Nunca

- rode ou curve a tampa amarela.
- coloque novamente a tampa amarela na caneta pré-cheia.
- retire a tampa amarela da caneta pré-cheia antes de estar pronto/a para a injeção.


Passo 5: Crie uma superfície firme para a injeção

Para o efeito, existem dois métodos:

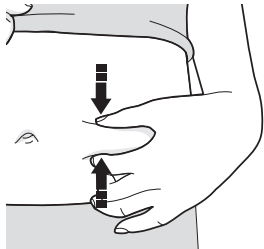

Método de compressão:

Aperte bem a pele entre o polegar e os dedos, de modo a obter uma superfície com cerca de 5 centímetros de largura.

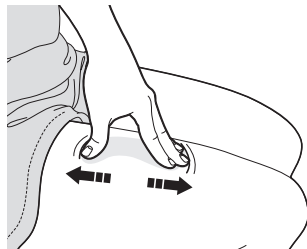


Método de extensão:

Desloque o polegar e os dedos vigorosamente em direção oposta, a fim de conseguir uma superfície com cerca de 5 centímetros de largura.

Importante: Mantenha a pele esticada ou comprimida durante a injeção.


Passo 6: Colocação da caneta pré-cheia

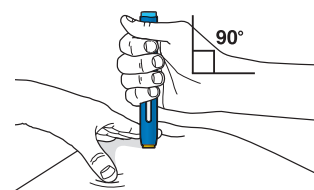

Durante a injeção, mantenha a pele esticada ou apertada. Após a remoção da tampa amarela, mantenha a caneta pré-cheia num ângulo de 90 graus na pele.



Importante: ainda não toque o botão de início azul.

Passo 7: Segure a caneta pré-cheia e acione o botão de início azul.

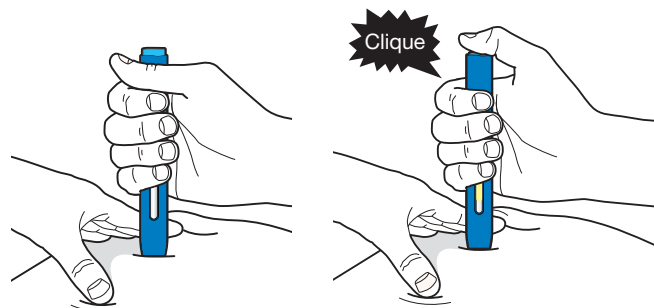

- Comprima bem a caneta pré-cheia contra a pele até que deixe de se mover.
- Quando estiver pronto/a para a injeção, prima o botão de início azul. Ouvirá um clique.
- A injeção começa automaticamente.


Passo 8: Continue a pressionar a caneta pré-cheia contra a pele

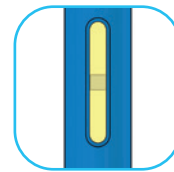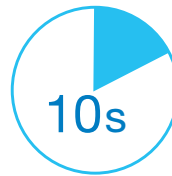

Conte lentamente até dez. A janela fica amarela, uma vez concluída a injeção. Possivelmente ouvirá um segundo clique. Pode, agora, afastar a caneta pré-cheia da pele, a agulha é protegida automaticamente.

Importante: Se, ao afastar a caneta pré-cheia da pele, a janela ainda não estiver amarela ou se parecer que o medicamento ainda não foi injetado, isso significa que não recebeu a dose completa. Telefone sem demora ao seu médico.

Passo 9: Após a injeção

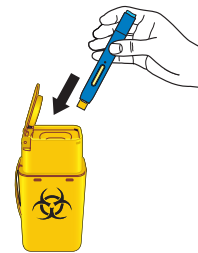

Elimine a caneta pré-cheia num recipiente impermeável imediatamente após a utilização. Não elimine a caneta pré-cheia e o recipiente impermeável juntamente com os resíduos domésticos, nem os recicle. Aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico sobre a eliminação correta.

Importante: Não reutilize a caneta pré-cheia usada. Mantenha o recipiente impermeável sempre fora do alcance das crianças.

Passo 10: Examine o local de injeção

Caso ocorra uma ligeira hemorragia no local de injeção, comprima-o por alguns segundos com uma bola de algodão ou gaze. **Jamais** friccione o local de injeção. Se necessário, aplique um penso rápido ou uma pequena ligadura.

AMGEN[®]
Care