

دليل الحقن الذاتي تحت الجلد حقنة أمجيفيتا® الجاهزة للاستعمال لمرة واحدة

جهّز ما يلي:

- ✓ حقنة جاهزة جديدة
- ✓ قطعة قطن مبلّلة بالكحول
- ✓ كرة قطن أو شاش
- ✓ شريطاً لاصقاً
- ✓ صندوق قمامة محكمًا غير منفذ

يُرجى الانتباه إلى ما يلي قبل الاستخدام:


- ✓ لا تتفدّ عملية الحقن إلا إذا بيّن لك طبيبك أو طاقم العيادة كيف تجري الحقن الذاتي.
- ✓ احتفظ بحقن أمجيفيتا® الجاهزة في الثلاجة عند درجة حرارة 2 إلى 8 °م.
- ✓ لا تستخدم حقنة أمجيفيتا® جاهزة، إذا سقطت على سطح صلب. يمكن أن تتضرر أجزاء من حقنة أمجيفيتا الجاهزة، حتى وإن لم يمكنك اكتشاف أي ضرر.
- ✓ اغسل يديك جيّدًا بالماء والصابون.

باستخدام حقنة أمجيفيتا® الجاهزة يمكنك إجراء حقن أمجيفيتا® بنفسك في المنزل.

مهم:

استخدم هذا الدواء دائمًا تمامًا حسبما تناقش معك طبيبك أو الصيدلي. اسأل طبيبك أو الصيدلي، إذا لم تكن متأكدًا.

الخطوة 1: خذ حقنة أمجيفيتا® جاهزة من العبوة

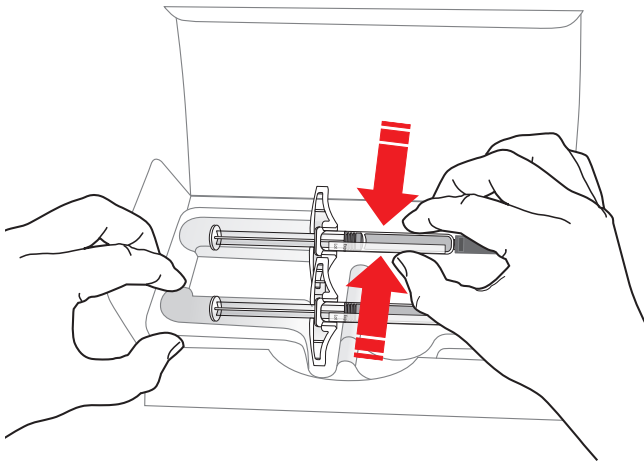

استخرج الحقنة الجاهزة قبل الحقن بحوالي 15 إلى 30 دقيقة بحذر واستقامة من الصندوق، بحيث يمكنها الوصول إلى درجة حرارة الغرفة. من أجل ذلك أمسك الحقنة الجاهزة من أسطوانة الحقن.


أعد العبوة الأصلية مع الحقن غير المستخدمة إلى الثلاجة.

لا تفعل هذا أبدًا


- لا تمسك الحقنة الجاهزة من ذراع الكيس أو من غطاء حماية الإبرة.
- لا تزل غطاء حماية الإبرة قبل أن تكون جاهزًا للحقن.
- لا تقم بإزالة شفة الأصابع، لأنها جزء من الحقنة.
- لا تعيد الحقنة الجاهزة إلى الثلاجة، إذا كانت قد وصلت إلى درجة حرارة الغرفة بالفعل.
- لا تحاول تسخين الحقنة الجاهزة باستخدام مصدر تسخين من قبيل الماء الساخن أو جهاز ميكروويف.
- لا تعرّض الحقنة الجاهزة لأشعة الشمس المباشرة.

مهم: أمسك الحقنة الجاهزة دائمًا من أسطوانة الحقن.

بعد الاستخدام

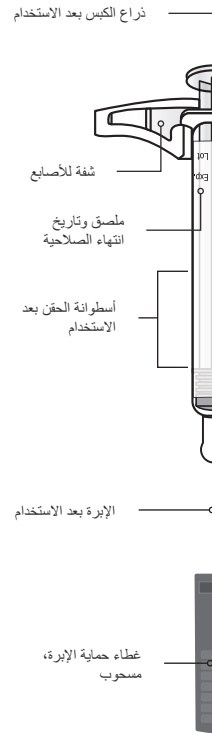


قبل الاستخدام

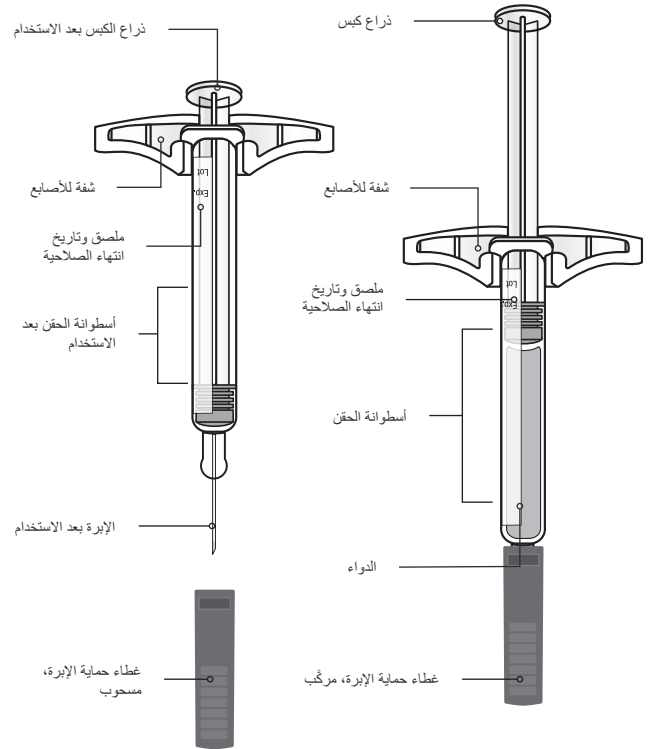

مهم: الإبرة مخبأة داخل القلم الجاهز.

الخطوة 2: افحص حقنة أمجيفيتا® الجاهزة

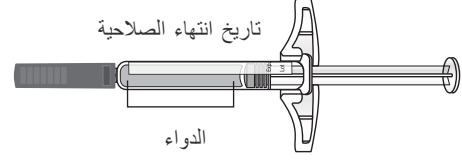


انتبه إلى أن يكون الدواء في أسطوانة الحقن نقيًا وديم اللون مانل إلى الصفرة. راجع تاريخ انتهاء الصلاحية. امسك الحقنة دائمًا من أسطوانة الحقن.

لا تستخدم الحقنة الجاهزة أبدًا، إذا

- كان الدواء عكرًا أو متغير اللون، أو يحتوي ندفاً أو جزئيات.
- تناثرت أجزاء منها أو بدا أنها مكسورة.
- فقد منها غطاء حماية الإبرة أو بدا غير متراكب بصورة آمنة.
- تجاوزت تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على الملصق.
- استخدم دائمًا حقنة جديدة في جميع هذه الحالات.


الخطوة 6: ضع الحقنة الجاهزة

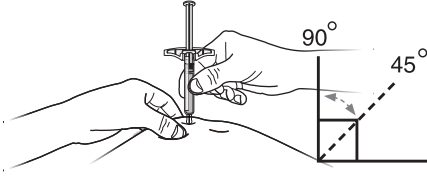

أبق الجلد مضغوطًا أثناء الحقن. أدخل الإبرة بزاوية من 45 إلى 90 درجة في الجلد بعد إزالة غطاء حماية الإبرة.

مهم: لا تضع إصبعك أبدًا على ذراع الكبس، بينما تغرس الإبرة في الجلد.

الخطوة 7: أزح ذراع الكبس ببطئ إلى أسفل

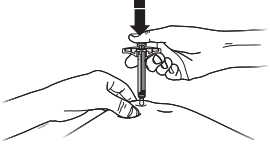


أزح ذراع الكبس بالإبهام ببطئ وبقدر متساوٍ من الضغط تمامًا إلى الأسفل، إلى أن يتوقف عن الحركة.

الخطوة 3: حضّر موضع الحقن في جلدك ونظّفه

اختر موضع الحقن:

- البطن (مع استثناء نطاق قدره حوالي 5 سنتيمترات حول سرة البطن) أو
- الفخذ

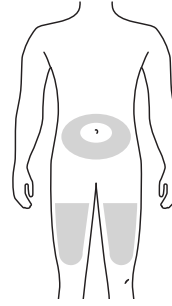


عقم موضع الحقن باستخدام قطعة قطن مبللة بالكحول. ما إن يجف الجلد، تكون جاهزًا للحقن.

مهم:

- تجنّب ملامسة موضع الحقن مرةً أخرى قبل الحقن.
- تأكد أنك لم تستخدم موضع الحقن نفسه تمامًا، الذي استخدمته في المرة الأخيرة.
- لا تختار مناطق يكون فيها الجلد حساسًا أو مجروحًا أو ملتهبًا أو متحجرًا.
- تجنّب الحقن في مناطق ذات ندوب أو علامات شد.
- إذا كنت مصابًا بمرض الصدفية، يتعين عليك تجنّب الحقن في مواضع بارزة أو سميقة أو متورمة أو مقشرة من الجلد أو في مواضع الجروح.

الخطوة 8: أزل الحقنة بحذر

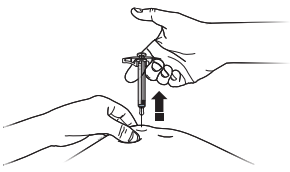

أطلق إبهامك وارفع الحقنة بحذر من جلدك.


الخطوة 9: بعد الحقن



تخلّص من الحقنة الجاهزة المستخدمة فورًا عقب الاستخدام في صندوق قمامة محكم غير منفذ. ولا تتخلّص من الحقنة الجاهزة المستخدمة وصندوق القمامة المحكم في النفايات المنزلية ولا تُعد تدويرهما. وتحدّث مع طبيبك أو الصيدلي حول طريقة التخلص المثلى منهما.

مهم: لا تُعيد استخدام الحقنة الجاهزة المستعملة ولا تعد إلى استخدام الدواء المتبقي في الحقنة المستعملة. وأبعد صندوق القمامة المحكم غير المنفذ عن متناول الأطفال.


الخطوة 4: اخلع غطاء حماية الإبرة

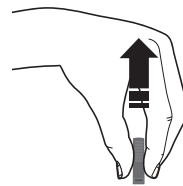

عندما تكون جاهزًا للحقن، اخلع غطاء حماية الإبرة في خطٍ مستقيم بعيدًا عن جسمك. من الطبيعي أن ترى قطرة من الدواء على طرف الإبرة.

لا تفعل هذا أبدًا

- لا تُدر غطاء حماية الإبرة أو تثنيه.
- لا تُعد تركيب غطاء حماية الإبرة على الحقنة الجاهزة.
- لا تخلع غطاء حماية الإبرة من الحقنة الجاهزة قبل أن تكون جاهزًا للحقن.

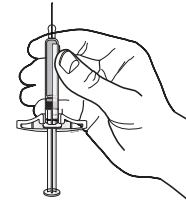


مهم: ألق غطاء حماية الإبر

ة في صندوق القمامة المجهّز غير المنفذ.

الخطوة 10: افحص موضع الحقن

إذا انبثقت عن موضع الحقن قطرات دم، فاضغط عليه لبضع ثوانٍ باستخدام كرة قطن أو شاش. لا تحك موضع الحقن أبدًا. وإذا دعت الحاجة ضع شريطًا لاصقًا أو ضمادة صغيرة.

الخطوة 5: هبّي سطحًا صلبًا للحقن

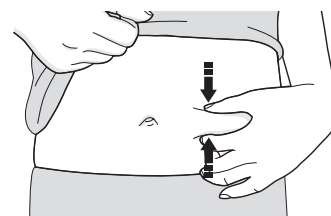

اضغط المنطقة بين الإبهام والأصابع، بحيث تنشئ مساحة عرضها 5 سنتيمترات تقريبًا.

مهم: ابق الجلد ممددًا أو مضغوطًا أثناء الحقن.

AMGEN®
Care