

Instruções para autoinjeção subcutânea

Seringa pré-cheia descartável AMGEVITA®

Com a seringa pré-cheia AMGEVITA®, pode proceder à sua própria injeção de AMGEVITA® em casa.

Importante:

Utilize sempre este medicamento exatamente conforme indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.


Antes da aplicação, tenha em consideração o seguinte:

- ✓ Administre a injeção apenas se o seu médico ou os profissionais de saúde já lhe tiverem mostrado como proceder à autoinjeção.
- ✓ Guarde as seringas pré-cheias AMGEVITA® no frigorífico à temperatura entre 2 e 8 °C.
- ✓ Não utilize uma seringa pré-cheia AMGEVITA®, se esta tiver caído sobre uma superfície dura. Partes da seringa pré-cheia AMGEVITA podem estar danificadas, mesmo que não se detetem quaisquer danos.
- ✓ Lave minuciosamente as mãos com água e sabão.


Prepare o seguinte:

- ✓ uma seringa pré-cheia nova
- ✓ gaze com álcool
- ✓ bola de algodão ou gaze
- ✓ penso rápido
- ✓ recipiente impermeável

Antes da administração

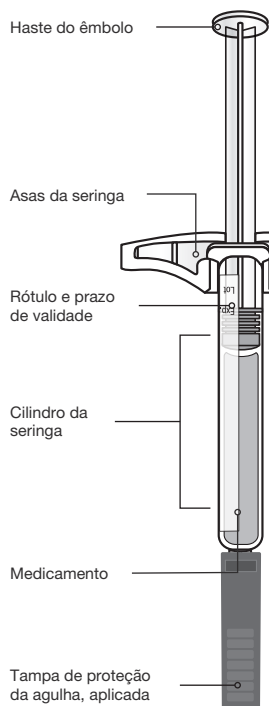


Após a administração

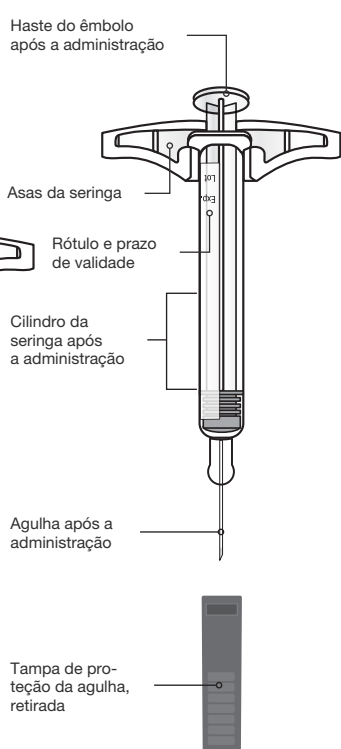

Importante: a agulha está na parte interna.

Passo 1: Retire uma seringa pré-cheia de AMGEVITA® da embalagem

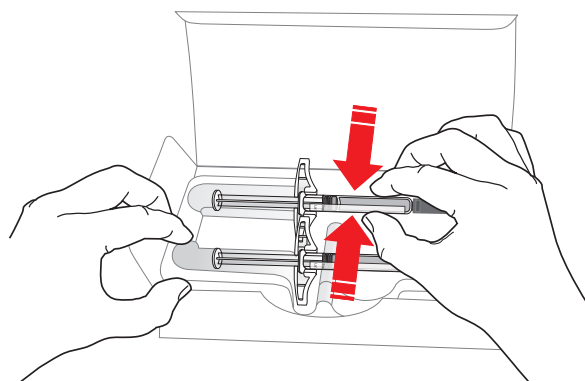

Cerca de 15 a 30 minutos antes da injeção, retire a seringa pré-cheia da caixa, para que possa atingir a temperatura ambiente. Para esse efeito, pegue na seringa pré-cheia pelo cilindro.


Coloque a embalagem original com seringas não utilizadas novamente no frigorífico.

Nunca

- pegue na seringa pré-cheia pela haste do êmbolo ou pela tampa de proteção da agulha.
- coloque a seringa pré-cheia novamente no frigorífico se já se encontrar à temperatura ambiente.
- tente aquecer a seringa pré-cheia utilizando uma fonte de calor como, p. ex., água quente ou um micro-ondas.
- agite a seringa pré-cheia.
- remova as asas da seringa, dado que fazem parte da mesma.
- exponha a seringa pré-cheia à luz solar direta.
- remova a tampa de proteção da agulha antes de estar pronto/a para a injeção.

Importante: Segure sempre na seringa pré-cheia pelo cilindro da mesma.

Passo 2: Controle a seringa pré-cheia AMGEVITA®

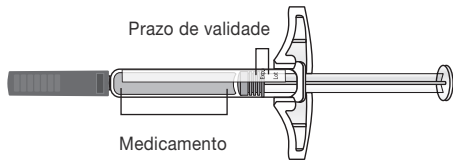


Verifique se o medicamento no cilindro da seringa está transparente e incolor a levemente amarelado. Verifique o prazo de validade. Segure sempre a seringa pelo corpo da seringa.

Nunca utilize a seringa pré-cheia, se

- o medicamento estiver turvo ou colorido ou apresentar flocos ou partículas.
- partes do dispositivo se tiverem soltado ou aparecerem partidas.
- a tampa de proteção da agulha faltar ou não estiver colocada com segurança.
- o prazo de validade sinalizado na etiqueta tiver expirado.

Utilize em qualquer caso uma seringa nova.

Passo 3: Prepare e limpe o local de injeção

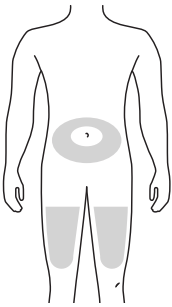

Escolha o local de injeção:


- Abdômen (exceto uma área com cerca de 5 centímetros em redor do umbigo) ou
- Coxas

Desinfete o local de injeção com uma gaze com álcool. Assim que a pele tiver secado, está pronta para a injeção.

Importante:

- Evite tocar novamente no local de injeção antes da injeção.
- Assegure-se de que não administra a injeção no mesmo local que utilizou da última vez.
- Não escolha áreas onde a pele esteja sensível, ferida, avermelhada ou endurecida – evite injetar em áreas com cicatrizes ou estrias.
- Se sofrer de psoríase, deverá evitar injetar em partes da pele salientes, espessas, avermelhadas ou escamosas ou em feridas.

Passo 4: Retire a tampa de proteção da agulha

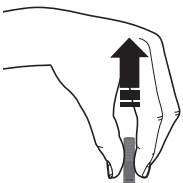


Quando estiver pronto/a para a injeção, puxe cuidadosamente a tampa de proteção da agulha em linha reta e afastada do corpo. É normal que veja uma gota de medicamento na ponta da agulha.

Nunca

- rode ou curve a tampa de proteção da agulha.
- coloque novamente a tampa de proteção da agulha na seringa pré-cheia.
- puxe a tampa de proteção da agulha da seringa pré-cheia antes de estar pronto/a para a injeção.

Importante: Elimine a ponta de proteção da agulha no recipiente imperfurável disponibilizado.


Passo 5: Crie uma superfície firme para a injeção

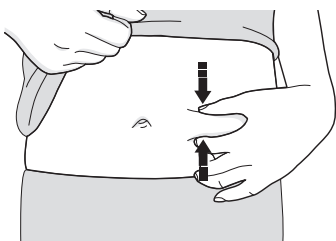

Aperte bem a pele entre o polegar e os dedos, de modo a obter uma superfície com cerca de 5 centímetros de largura.

Importante: mantenha a pele comprimida durante a injeção.


Passo 6: Colocação da seringa pré-cheia

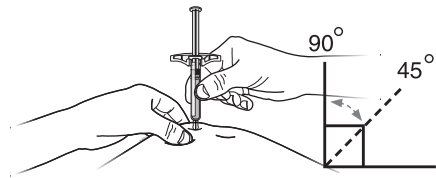

Durante a injeção, mantenha a pele apertada. Depois de remover a tampa de proteção da agulha, insira a agulha num ângulo de 45 a 90 graus relativamente à pele.


Importante: Nunca coloque os dedos na haste do êmbolo enquanto insere a agulha.

Passo 7: Empurre a haste do êmbolo ligeiramente para baixo

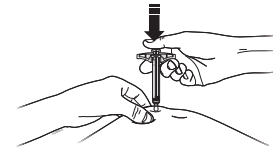

Lentamente e com uma pressão uniforme, empurre a haste do êmbolo com o polegar totalmente para baixo, até que deixe de se mover.

Passo 8: Retire suavemente a seringa

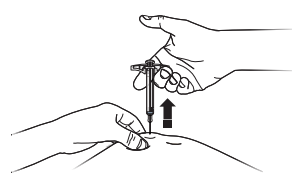

Solte o polegar e afaste a seringa da sua pele com suavidade.

Passo 9: Após a injeção



Elimine a seringa pré-cheia usada num recipiente imperfurável imediatamente após a utilização. Não elimine a seringa pré-cheia usada e o recipiente imperfurável com os resíduos domésticos, nem os recicle. Aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico sobre a eliminação correta.

Importante: não reutilize a seringa pré-cheia usada nem aproveite o medicamento que permaneça na seringa usada. Mantenha o recipiente imperfurável sempre fora do alcance das crianças.

Passo 10: Examine o local de injeção

Caso ocorra uma ligeira hemorragia no local de injeção, comprima-o por alguns segundos com uma bola de algodão ou gaze. **Jamais** friccione o local de injeção. Se necessário, aplique um penso rápido ou uma pequena ligadura.

AMGEN®
Care