

Инструкции по проведению подкожной самоинъекции Шприц инъекционный одноразовый AMGEVITA®

Инъекционный шприц AMGEVITA® позволит Вам проводить инъекции препарата AMGEVITA® в домашних условиях.

Важно:

При использовании препарата строго следуйте рекомендациям Вашего врача или фармацевта. В случае любых сомнений обратитесь к своему врачу или фармацевту.


Перед использованием ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

- ✓ Проводите инъекцию лишь в том случае, если Ваш врач или медицинские сотрудники продемонстрировали Вам, как выполнять самоинъекцию.
- ✓ Храните готовые шприцы AMGEVITA® в холодильнике при температуре 2-8 °С.
- ✓ Не используйте готовый шприц AMGEVITA® в случае его падения на твердую поверхность. Части шприца AMGEVITA могут быть повреждены, даже если визуально Вы не замечаете каких-либо повреждений.
- ✓ Тщательно вымойте руки водой с мылом.


Подготовьте следующие компоненты:

- ✓ новый готовый шприц
- ✓ смоченный в спирте тампон
- ✓ ватный тампон или бинт
- ✓ пластырь
- ✓ прочный (непробиваемый) контейнер

Перед применением

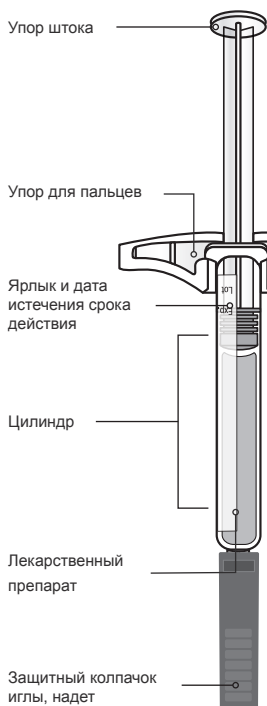


После применения

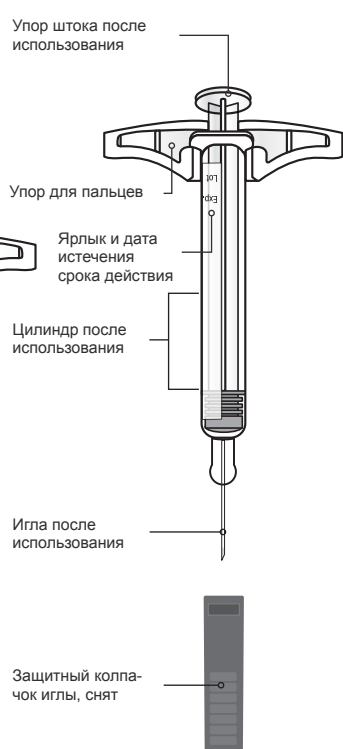

Важно: игла скрыта во внутренней части шприца

Шаг 1: Извлеките готовый шприц AMGEVITA® из упаковки

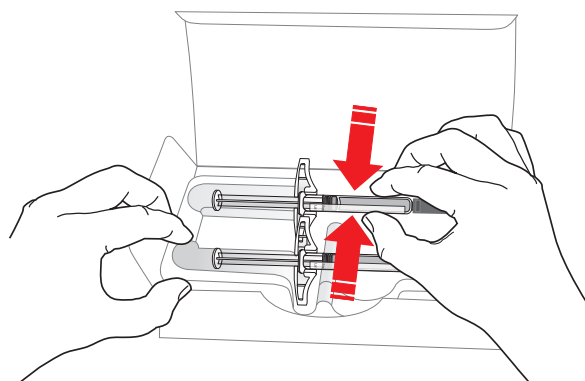

Извлеките шприц из упаковки примерно за 15–30 минут до инъекции, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. При извлечении удерживайте шприц за цилиндр.


Оригинальную упаковку с неиспользованными шприцами следует вернуть в холодильник.

Никогда

- не удерживайте готовый шприц за упор штока или защитный колпачок иглы.
- не кладите готовый шприц в холодильник, если он достиг комнатной температуры.
- не пытайтесь нагреть готовый шприц с помощью источников тепла, таких как горячая вода или микроволновая печь.
- не встряхивайте готовый шприц.
- не снимайте упор для пальцев – он является частью шприца.
- не подвергайте готовый шприц воздействию прямым солнечным лучам.
- не снимайте защитный колпачок для иглы, прежде чем будете готовы к инъекции.

Важно: всегда удерживайте готовый шприц за цилиндр.

Шаг 2: Проверьте готовый шприц AMGEVITA®

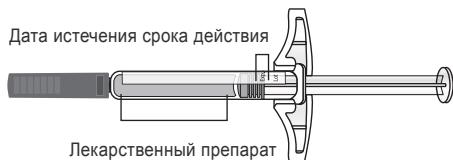


Убедитесь, что препарат в цилиндре шприца прозрачен, а его оттенок варьируется от бесцветного до желтоватого. Проверьте его срок годности. При обращении со шприцом всегда держите его за цилиндр.

Никогда не используйте готовый шприц, если

- препарат выглядит мутным, изменил свой цвет либо имеет примеси в виде хлопьев или других частиц.
- имеются признаки нарушения его целостности.
- защитный колпачок иглы отсутствует или ненадежно закреплен.
- срок годности, указанный на этикетке, истек.

Во всех таких случаях используйте новый шприц.

Шаг 3: Подготовьте и продезинфицируйте место инъекции

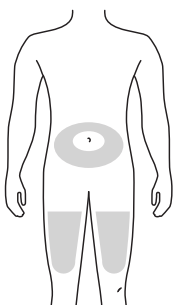

Выберите место инъекции:


- Живот (за исключением области вокруг пупка около 5 сантиметров) или
- Верхняя часть бедра

Продезинфицируйте область инъекции при помощи смоченного в спирте тампона. Как только кожа высохнет, можно делать инъекцию.

Важно:

- Избегайте прикосновения к месту инъекции непосредственно перед введением иглы.
- Убедитесь, что Вы выбрали новое место для инъекции, не совпадающее с тем, в котором она производилась в последний раз.
- Избегайте участков, в которых кожа особенно чувствительна, повреждена, имеет покраснения либо затвердения – не выполняйте инъекции в области рубцов или растяжек.
- Пациентам с псориазом (чешуйчатый лишай) следует избегать инъекций непосредственно в участки покрасневшей или шелушащейся кожи, или в очаги поражения на коже с выпуклыми псориатическими высыпаниями, уплотнениями или ранами.

Шаг 4: Снимите защитный колпачок иглы

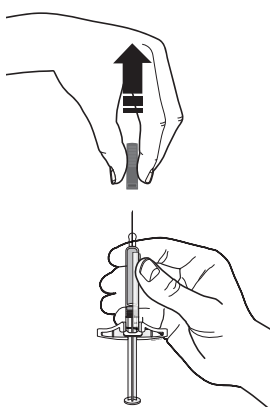


Когда Вы будете готовы к инъекции, аккуратно снимите колпачок иглы, потянув за него прямо и от себя. На кончике иглы может выступить капля препарата, что считается нормальным явлением.

Никогда

- не поворачивайте и не сгибайте защитный колпачок иглы.
- не надевайте защитный колпачок иглы повторно на готовый шприц.
- не снимайте защитный колпачок для иглы, прежде чем будете готовы к инъекции.

Важно: выбрасывайте защитные колпачки строго в прилагаемый прочный контейнер.


Шаг 5: Создайте твердую поверхность для инъекции

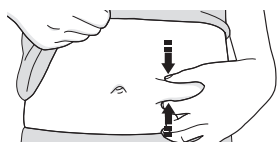

Сформируйте кожную складку между большим и указательным пальцами руки таким образом, чтобы образовался участок кожи шириной около 5 сантиметров.

Важно: непрерывно удерживайте кожную складку при выполнении инъекции.


Шаг 6: Разместите шприц

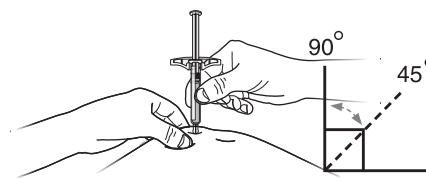

Сформируйте кожную складку. Введите иглу в кожу под углом от 45 до 90 градусов, предварительно сняв защитный колпачок.


Важно: при прокалывании кожи никогда не кладите пальцы на упор штока.

Шаг 7: Плавным нажатием доведите упор штока до нижнего положения

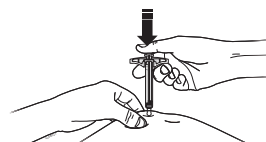

Большим пальцем медленно и с равномерным давлением нажимайте на упор штока до максимального продвижения поршня.

Шаг 8: Осторожно извлеките шприц

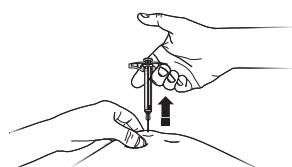

Снимите большой палец с упора и осторожно извлеките иглу шприца из кожи.

Шаг 9: После выполнения инъекции



Утилизируйте шприц сразу после использования, поместив его в прочный контейнер. Использованные шприцы и контейнеры нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами или подвергать их переработке. Обратитесь к своему врачу или фармацевту за консультацией по надлежащей утилизации.

Важно: никогда не используйте готовый шприц повторно, равно как и лекарство, оставшееся в использованном шприце. Всегда храните прочный контейнер для шприцов в недоступном для детей месте.

Шаг 10: Проверьте место инъекции

В случае появления крови на месте инъекции прижмите к нему ватный тампон или бинт на несколько секунд. **Ни в коем случае** не растирайте место инъекции. При необходимости наложите пластырь или небольшую повязку.

AMGEN®
Care