



AMGEVITA®-Siringa preriempita monouso

Guida all'autoiniezione sottocutanea

La siringa preriempita AMGEVITA® consente di effettuare l'iniezione di AMGEVITA® anche a casa.

Importante:

Usare questo medicinale seguendo sempre le istruzioni ricevute dal medico o dal personale sanitario. In caso di dubbi, chiedere consiglio al medico o al farmacista.

Prima dell'uso, ricordare quanto segue:

- ✓ Effettuare l'autoiniezione solo se il medico o il personale dell'ambulatorio le ha già mostrato come fare.
- ✓ Conservare le siringhe preriempite AMGEVITA® in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C. Non congelare.
- ✓ Non utilizzare la siringa preriempita AMGEVITA® se è caduta su una superficie dura. L'impatto potrebbe aver danneggiato parti della siringa preriempita AMGEVITA®, anche se in maniera non evidente.
- ✓ Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Procurarsi quanto segue:


- ✓ Tampone imbevuto di alcool
- ✓ Cerotto
- ✓ Una nuova siringa preriempita
- ✓ Batuffolo di ovatta o garza
- ✓ Contenitore impermeabile

Passaggi importanti per l'iniezione

Passaggio 1: Informazioni importanti da ricordare prima di effettuare l'iniezione con AMGEVITA®



- AMGEVITA® è disponibile in tre dosaggi differenti: 20 mg/0,2 ml, 40 mg/0,4 ml, 80 mg/0,8 ml. Controllare la ricetta medica per accertarsi di aver ricevuto la dose corretta.
- Le siringhe preriempite con i diversi dosaggi hanno colore e aspetto differenti. Anche la quantità di medicinale contenuta nella siringa preriempita varia in base al dosaggio.

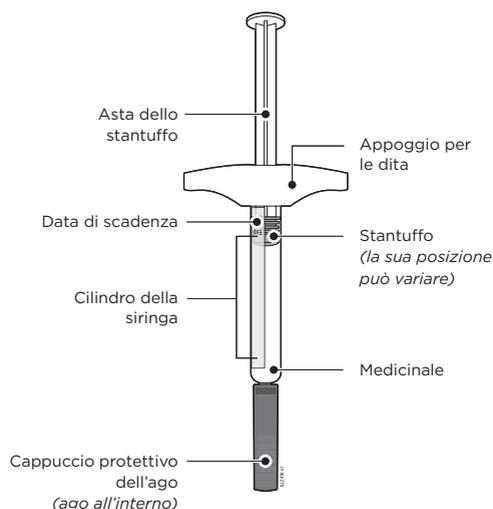

Passaggio 2: Prelevare una siringa preriempita AMGEVITA® dalla confezione.


Estrarre la siringa preriempita dalla scatola 30 minuti prima dell'iniezione, per permetterle di raggiungere la temperatura ambiente. Afferrare la siringa preriempita in corrispondenza del cilindro della siringa. Riporre in frigorifero tutte le siringhe preriempite non utilizzate.

È vietato:

- toccare l'appoggio per le dita, l'asta dello stantuffo o il cappuccio protettivo dell'ago.
- rimuovere il cappuccio protettivo dell'ago finché non si è pronti per l'iniezione.
- riporre la siringa preriempita in frigorifero una volta che ha raggiunto la temperatura ambiente.
- cercare di scaldare la siringa preriempita con fonti di calore quali ad es. acqua calda, un microonde o esponendola alla luce solare diretta.
- esporre la siringa preriempita alla luce solare diretta.
- agitare la siringa preriempita.

Importante:

Tenere la siringa preriempita sempre in corrispondenza del cilindro.

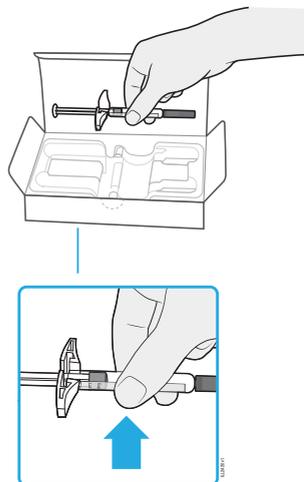


Passaggio 3: Controllare la siringa preriempita AMGEVITA®.

Accertarsi che il medicinale contenuto nel cilindro della siringa sia limpido e incolore o leggermente giallognolo. Controllare la data di scadenza. Tenere la siringa sempre in corrispondenza del cilindro.

Non utilizzare la siringa preriempita se

- il medicinale appare torbido, di colore alterato o contiene fiocchi o particelle.
- la siringa presenta spaccature o parti rotte.
- il cappuccio protettivo dell'ago è assente o allentato.
- è stata superata la data di scadenza.


In tutti i casi, utilizzare una siringa nuova.

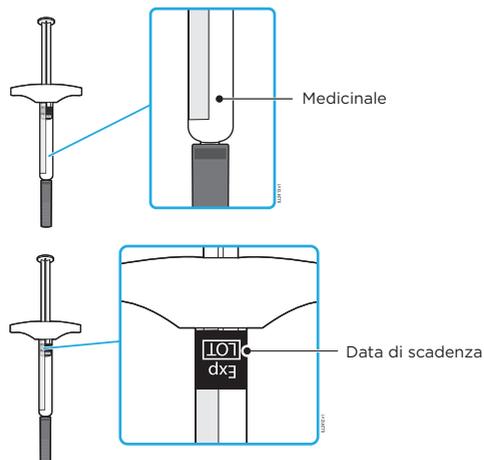

Passaggio 4: Preparazione e pulizia del sito di iniezione.

Scegliere il sito di iniezione:

- **Addome** (escludendo un'area di circa 5 centimetri intorno all'ombelico) oppure
- **Coscia**

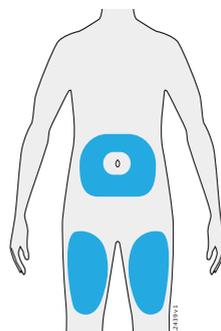


Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Pulire il sito di iniezione con un tampone imbevuto di alcool e lasciar asciugare la pelle all'aria.

Importante:

- Non toccare più il sito di iniezione prima dell'iniezione.
- Scegliere un sito diverso per ogni iniezione.
- Evitare le aree con cicatrici o smagliature e le aree in cui la pelle è sensibile, arrossata o indurita o dove sono presenti ematomi.
- Se si soffre di psoriasi, non effettuare l'iniezione direttamente nelle aree cutanee in rilievo, ispessite, arrossate o desquamate o nelle ferite.

Passaggio 5: Togliere il cappuccio protettivo dell'ago tirandolo via dritto.

Quando si è pronti per l'iniezione, togliere cautamente il cappuccio protettivo dell'ago tenendo la siringa preriempita in corrispondenza del cilindro. La presenza di una goccia di medicinale sulla punta dell'ago è normale.

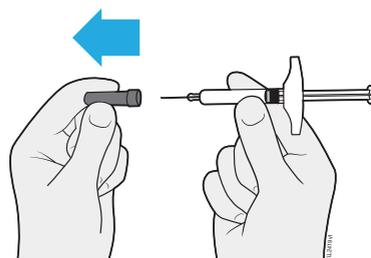


È vietato

- ruotare o piegare il cappuccio protettivo dell'ago.
- rimettere il cappuccio protettivo dell'ago sulla siringa preriempita.
- appoggiare la siringa preriempita su una superficie dopo aver tolto il cappuccio protettivo dell'ago.
- togliere il cappuccio protettivo dell'ago dalla siringa preriempita prima di essere pronti a effettuare l'iniezione.
- cercare di espellere eventuali bolle d'aria dalla siringa preriempita. La presenza di bolle d'aria non è un problema.

Passaggio 6: Prima dell'iniezione, premere la pelle del sito di iniezione tra due dita.

- Premere la pelle tra pollice e indice per formare una piega cutanea per l'iniezione.
- Se possibile, la piega cutanea dovrebbe essere larga circa 5 cm.

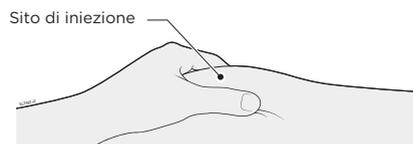


Passaggio 7: Inserire l'ago nella piega cutanea.

Inserire l'ago nella piega cutanea tenendolo dritto o formando un angolo di 45 gradi.

Importante:

Non appoggiare il dito sull'asta dello stantuffo mentre si inserisce l'ago, perché parte del medicinale potrebbe andare perso.

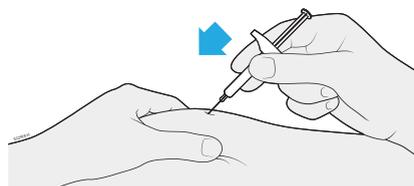


Passaggio 8: Spingere l'asta dello stantuffo lentamente verso il basso.

Spingere l'asta dello stantuffo lentamente verso il basso fino a raggiungere il fondo della siringa preriempita.

Importante:

Tenere la pelle premuta fino alla conclusione dell'iniezione. Non tirare **mai** indietro lo stantuffo. **Non** rimuovere l'ago prima di aver somministrato l'intera dose.

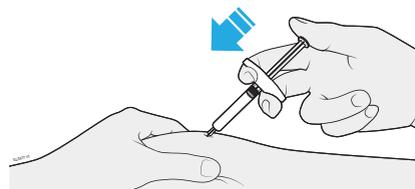

Passaggio 9: Dopo l'iniezione

Importante:


Non rimettere mai il cappuccio protettivo sull'ago.

Subito dopo l'uso, smaltire la siringa preriempita usata e il cappuccio protettivo dell'ago in un contenitore impermeabile.

Non gettare la siringa preriempita usata e il contenitore impermeabile nei rifiuti domestici e **non** riciclarli. Consultare il medico o il personale della farmacia sulle modalità corrette di smaltimento.

Importante:

Non riutilizzare la siringa preriempita usata né il medicinale rimasto nella siringa usata. Conservare il contenitore impermeabile sempre fuori dalla portata dei bambini.

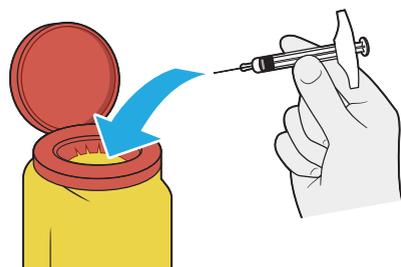

Passaggio 10: Controllo del sito di iniezione.

Non strofinare il sito di iniezione. In caso di perdita di sangue, tamponare il sito di iniezione con un batuffolo di ovatta o una garza. Se necessario, applicare un cerotto.

Per informazioni più dettagliate, si rimanda al foglio illustrativo.