



AMGEVITA® Tek kullanımlık kullanıma hazır şırınga

Subkutan kendi kendine enjeksiyon kılavuzu

Kullanıma hazır AMGEVITA® şırınga ile AMGEVITA®'yı evde kendi kendinize enjekte edebilirsiniz.

Önemli:

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya sağlık uzmanınızın size söylediği şekilde kullanın. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Lütfen uygulamadan önce şunlara dikkat edin:


- ✓ Enjeksiyonu yalnızca doktorunuz veya muayenehane personeli size kendi kendine enjeksiyonun nasıl yapılacağını gösterdikten sonra yapın.
- ✓ Kullanıma hazır AMGEVITA® şırıngalarını buzdolabında 2 ila 8°C'de saklayın. Dondurmayın.
- ✓ Sert bir yüzeye düşmüş olan bir kullanıma hazır AMGEVITA® şırıngayı kullanmayın. Siz herhangi bir hasar fark edemeseniz bile, kullanıma hazır AMGEVITA® şırınganın parçaları hasar görmüş olabilir.
- ✓ Ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın.

Aşağıdakileri hazırlayın:


- ✓ Yeni bir kullanıma hazır şırınga
- ✓ Alkollü pamuk
- ✓ Yara bandı
- ✓ Pamuklu ped veya gazlı bez
- ✓ Delinmeye karşı güvenli kap

Önemli enjeksiyon adımları

1. adım: AMGEVITA® enjekte etmeden önce bilmeniz gereken önemli bilgiler

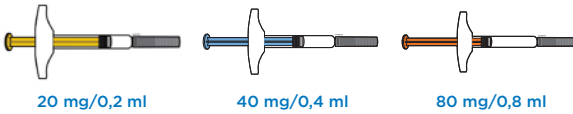

- AMGEVITA® üç farklı dozajda sunulmaktadır: 20 mg/0,2 ml, 40 mg/0,4 ml, 80 mg/0,8 ml. Doğru dozu aldığınızdan emin olmak için reçetenizi kontrol edin.
- Kullanıma hazır şırıngaların renk ve görünümü her bir dozaj için farklıdır. Kullanıma hazır şırıngadaki ilaç miktarı da her doz için farklıdır.

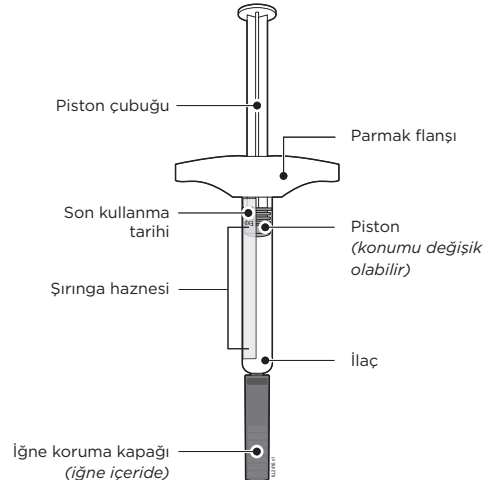

2. adım: Ambalajdan bir kullanıma hazır AMGEVITA® şırınga çıkarın.


Oda sıcaklığına ulaşabilmesi için kullanıma hazır şırıngayı enjeksiyondan 30 dakika önce kutudan alın. Kullanıma hazır şırıngayı şırınga haznesinden tutun. Kullanmadığınız diğer şırıngaları tekrar buzdolabına koyun.

Asla:

- Parmak flanşından, piston çubuğundan ya da iğne koruma kapağından tutmayın.
- Enjeksiyona hazır olmadan önce iğne koruma kapağını çıkarmayın.
- Kullanıma hazır şırınga oda sıcaklığına ulaşmışsa onu tekrar buzdolabına koymayın.
- Kullanıma hazır şırıngayı sıcak su veya mikrodalga fırın gibi bir ısı kaynağı kullanarak ya da doğrudan güneş ışığı altında ısıtmaya çalışmayın.
- Kullanıma hazır şırıngayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Kullanıma hazır şırıngayı çalkalamayın.

Önemli:

Kullanıma hazır şırıngayı daima şırınga haznesinden tutun.

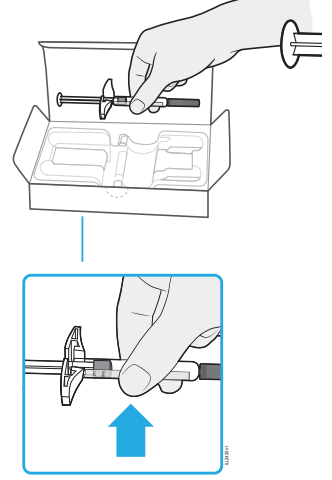


3. adım: Kullanıma hazır AMGEVITA® şırıngayı kontrol edin.

Şırınga haznesindeki ilacın berrak ve renksiz ila hafif sarımsı olduğundan emin olun. Son kullanma tarihini kontrol edin. Şırıngayı daima şırınga haznesinden tutun.

Aşağıdaki durumlarda kullanıma hazır şırıngayı asla kullanmayın

- İlaç bulanıksa veya rengi değişmişse ya da pullar veya parçacıklar içeriyorsa.
- Parçaları çatlamış veya kırılmışsa,
- İğne koruma kapağı yerinde değilse veya sıkıca takılı değilse.
- Son kullanma tarihi geçmişse.

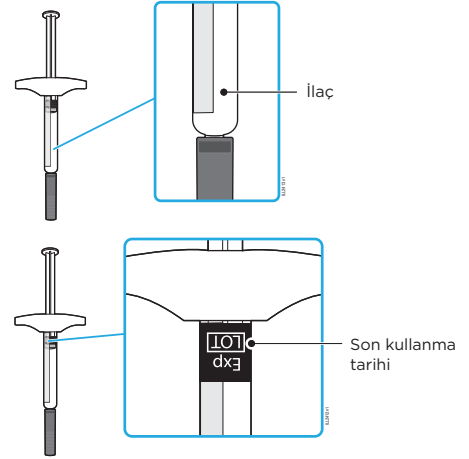


Her durumda yeni bir şırınga kullanın.

4. adım: Enjeksiyon noktasını hazırlayın ve temizleyin.

Enjeksiyon noktasını seçin:

- **Karın** (göbek çevresinde yaklaşık 5 santimetrelilik bir alan dışında) veya
- **Uyluk**

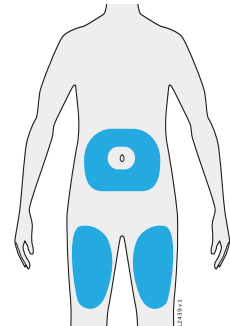


Ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın. Enjeksiyon noktasını alkol   pamukla temizleyin ve cildinizin havada kurumasını bekleyin.

 nemli:

- Enjeksiyondan  nce enjeksiyon noktasına tekrar dokunmaktan ka ının.
- Her enjeksiyon i in ba ka bir yer se in.
- Yara izleri,  atlaklar olan veya cildin hassas, kızarık, sertle mi  veya morarmı  oldu u b lgelerden ka ının.
- Sedef hastalı ınız (psoriasis) varsa, do rudan kabarık, kalın, kızarık veya pullu cilt b lgelerine veya yaralara enjeksiyon uygulamaktan ka ınmalısınız.

5. adım:   ne koruma kapa ını d z bir  ekilde  ıkarın.

Enjeksiyona hazır oldu unuzda, kullanıma hazır  iringayı  iringa haznesinden tutarak   ne koruma kapa ını  ekip  ıkarın.   nenin ucunda bir damla ila  g rmeniz normaldir.

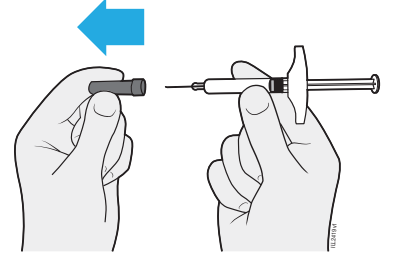


Asla

-   ne koruma kapa ını d nd rmeyin veya b kmeyin.
-   ne koruma kapa ını kullanıma hazır  iringaya tekrar takmayın.
-   ne koruma kapa ı  ıkarıldıktan sonra kullanıma hazır  iringayı herhangi bir y zeyin  zerine koymayın.
- Enjeksiyona hazır olmadan  nce   ne koruma kapa ını kullanıma hazır  iringadan  ıkarmayın.
- Kullanıma hazır  iringadaki hava kabarcıklarını bastırarak  ıkarmaya  alı mayın. Hava kabarcıklarının g r lmesi sorun de ildir.

6. adım: Enjeksiyondan  nce enjeksiyon noktasında cildi sıkın.

- Enjeksiyon i in bir y kselti olu turmak  zere deriyi ba parma ınız ve  aret parma ınız arasında sıkın.
- Y kselti m mk nse yaklaşık 5 cm geni li inde olmalıdır.

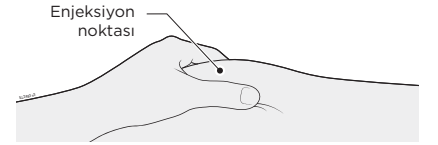


7. adım:   neyi sıkılmı  deriye batırın.

  neyi sıkılmı  deriye d z olarak veya 45 derecelik bir a ıyla batırın.

 nemli:

  neyi batırırken parma ınızı piston  ubu unun  zerine koymayın, bu ila  kaybına neden olabilir.

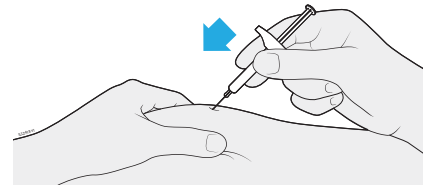


8. adım: Piston çubuğunu yavaşça aşağıya doğru itin.

Piston çubuğunu kullanıma hazır şırınganın dibine ulaşana kadar yavaşça aşağıya itin.

Önemli:

Enjeksiyon tamamlanana kadar cildi sıkıştırılmış şekilde tutun. Pistonu **hiçbir** zaman geriye çekmeyin. Dozun tamamı verilmeye kadar iğneyi **çıkarmayın**.

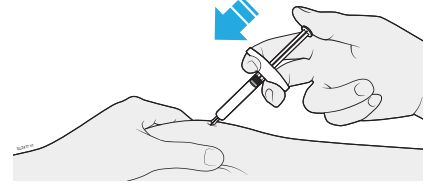

9. adım: Enjeksiyondan sonra.


Önemli:

İğne koruma kapağını asla tekrar iğnenin üzerine takmayın.

Kullanılmış şırıngayı ve koruyucu iğne kapağını kullanımdan hemen sonra delinmeye karşı güvenli bir kaba atın. Kullanılmış şırıngayı ve delinmeye karşı güvenli kabı evsel atıklarla birlikte **atmayın** ve geri **dönüştürmeyin**. Kuralına uygun şekilde bertaraf etme konusunda doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Önemli:

Kullanılmış şırıngayı tekrar **kullanmayın** ve kullanılmış şırıngada artakalan ilacı tekrar **uygulamayın**. Delinmeye karşı güvenli kabı daima çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

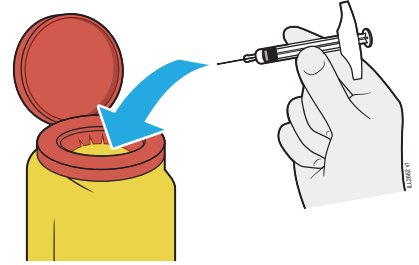

10. adım: Enjeksiyon noktasını kontrol edin.

Enjeksiyon noktasını **ovalamayın**. Eğer kan çıkarsa, enjeksiyon yerine pamuklu ped veya gazlı bez bastırın. Gerekirse bir yara bandı kullanın.

Ambalaj prospektüsünde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.