


Schritt 8: Überprüfen Sie den Fertigpen.

- Überprüfen Sie, ob die vollständige Dosis des Arzneimittels injiziert wurde.
- Die gelbe Sicherheitshülse **nicht** berühren.
- Eine kleine Menge Flüssigkeit an der Injektionsstelle ist in Ordnung.

Wichtig:

Wenn das Sichtfenster nicht vollständig gelb ist oder es so aussieht, als ob das Arzneimittel noch injiziert wird, oder wenn Sie mehrere Tropfen des Arzneimittels sehen, kann das bedeuten, dass nicht die vollständige Dosis injiziert wurde. Rufen Sie unverzüglich Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal an.

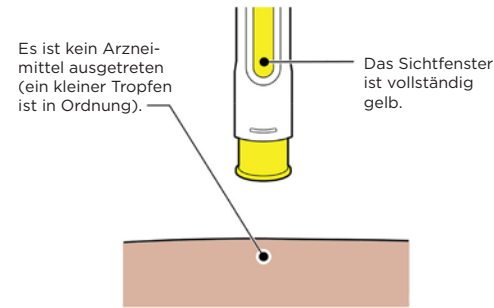

Schritt 9: Prüfen Sie die Injektionsstelle.


Reiben Sie **nicht** an der Injektionsstelle. Falls Sie Blut bemerken, drücken Sie einen Wattebausch oder Verbandmull auf die Injektionsstelle. Verwenden Sie bei Bedarf ein Pflaster.



Schritt 10: Entsorgen Sie den Fertigpen.

Entsorgen Sie den gebrauchten Fertigpen und die Kappe in einem durchstichsicheren Behälter*.

- Den Fertigpen **nicht** wiederverwenden.
- Die gelbe Sicherheitshülse **nicht** berühren.

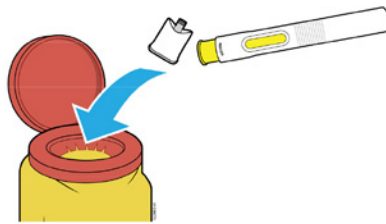

Wichtig:

Werfen Sie den Fertigpen nicht in Ihren Haushaltsabfall.

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Packungsbeilage.

* Patient:innen können diesen Behälter im Rahmen des Therapiebegleitprogramms anfordern.



Bitte beachten Sie die WEZENLA®-Gebrauchsinformation.



Dieses Material wurde auf recyceltem Papier gedruckt.



WEZENLA®-Fertigpen zum Einmalgebrauch

Anleitung zur subkutanen Selbstinjektion

Mit dem Fertigpen können Sie die Injektion von WEZENLA® zu Hause selbst vornehmen. Beachten Sie bitte die WEZENLA®-Gebrauchsinformation.

Wichtig:

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau so an, wie Ihre Ärztin, Ihr Arzt oder das medizinische Fachpersonal es mit Ihnen besprochen hat. Fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre:n Apotheker:in, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Vor der Anwendung beachten Sie bitte Folgendes:

- ✓ Führen Sie die Injektion nur aus, wenn Ihnen Ihre Ärztin, Ihr Arzt oder das Praxispersonal bereits gezeigt hat, wie Sie die Selbstinjektion vornehmen.
- ✓ Lagern Sie die Fertigpens im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C. Nicht einfrieren.
- ✓ Wenden Sie den Fertigpen nicht an, wenn er auf eine harte Oberfläche gefallen ist. Teile des Fertigpens könnten zerbrochen sein, selbst wenn Sie keinen Bruch sehen können.
- ✓ Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.

Legen Sie Folgendes bereit:

- ✓ Alkoholtupfer
- ✓ Pflaster
- ✓ Einen neuen Fertigpen
- ✓ Wattebausch oder Verbandmull
- ✓ Durchstichsicheren Behälter


Vorbereitung zur WEZENLA®-Injektion

Schritt 1: Nehmen Sie den WEZENLA®-Fertigpen aus der Verpackung.

Entnehmen Sie die Anzahl an Fertigpens, die Sie für die Injektion benötigen, aus dem Kühlschrank. Warten Sie 30 Minuten und lassen Sie den Fertigpen von alleine warm werden. Die Anwendung des Fertigpens bei Raumtemperatur stellt sicher, dass die gesamte Dosis abgegeben wird, und ermöglicht eine angenehmere Injektion.

Niemals

- den Fertigpen zurück in den Kühlschrank legen, wenn er bereits Raumtemperatur erreicht hat.
- den Fertigpen mit heißem Wasser, in der Mikrowelle oder durch direktes Sonnenlicht erwärmen.
- den Fertigpen schütteln.

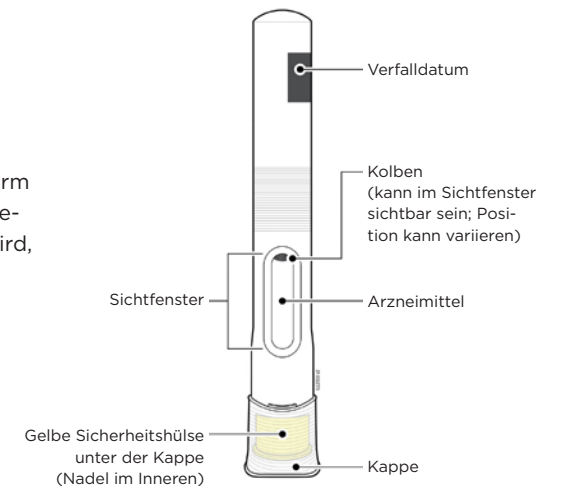


Schritt 2: Kontrollieren Sie den WEZENLA®-Fertigpen.

Überprüfen Sie das Arzneimittel. Es sollte klar bis opaleszierend, farblos bis schwach gelblich sein. Überprüfen Sie das Verfalldatum (EXP) und kontrollieren Sie den Fertigpen auf Beschädigungen.

Wenden Sie den Fertigpen nicht an, wenn

- das Arzneimittel gefroren, trübe oder verfärbt ist oder andere fremdartige Schwebstoffe enthält.
- der Fertigpen Risse oder gebrochene Teile aufweist.
- der Fertigpen auf eine harte Oberfläche gefallen ist.
- die Kappe fehlt oder locker ist.
- das Verfalldatum, das auf dem Etikett aufgedruckt ist, überschritten ist.

Benutzen Sie in allen Fällen einen neuen Fertigpen.

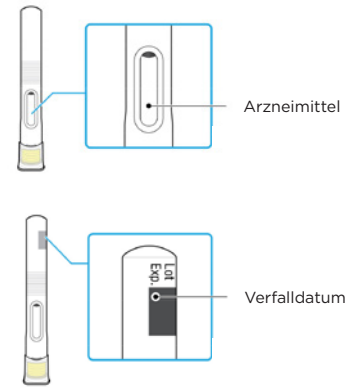

Schritt 3: Bereiten Sie die Injektionsstelle vor und reinigen Sie diese.

Wählen Sie Ihre Injektionsstelle aus:


- **Bauch** (jedoch nicht 5 cm um den Bauchnabel herum) oder
- **die Vorderseite Ihres Oberschenkels**. Eine andere Person kann die Injektion in Ihren Oberschenkel oder Bauch durchführen.

Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und Wasser.

Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer und lassen Sie die Haut an der Luft trocknen. Diesen Bereich vor der Injektion **nicht** noch einmal berühren.

Wichtig:

Vermeiden Sie Bereiche mit Narben, Dehnungsstreifen oder Bereiche, an denen die Haut empfindlich, verletzt, gerötet oder verhärtet ist. Injizieren Sie nach Möglichkeit nicht in Hautstellen, die Anzeichen von Psoriasis aufweisen.

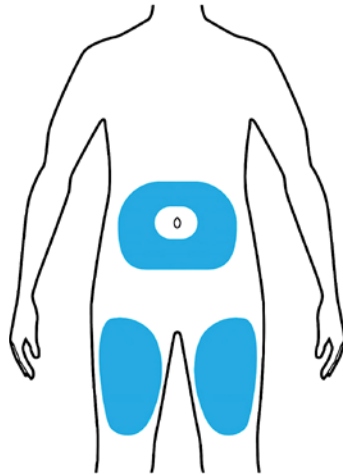


Schritt 4: Ziehen Sie die Kappe ab.

Halten Sie den Fertigpen so, dass Sie das Sichtfenster sehen können. Ziehen Sie fest an der Kappe, um sie zu entfernen. Sie können die Kappe drehen, um sie leichter zu entfernen. Es ist normal, wenn Sie einen Tropfen Arzneimittel an der Nadelspitze oder der gelben Sicherheitshülse sehen.

Wichtig:

- Nehmen Sie die Kappe erst unmittelbar (max. 5 Minuten) vor der Injektion ab, weil das Arzneimittel austrocknen kann.
- Die Kappe **nicht** wieder aufsetzen.
- Die gelbe Sicherheitshülse nicht berühren oder drücken.
- Den Finger nicht in die gelbe Sicherheitshülse stecken.

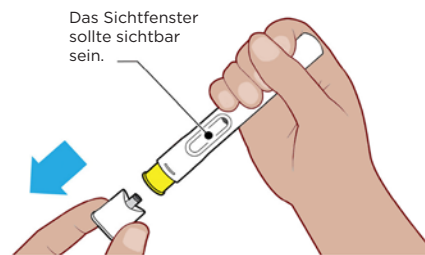

Schritt 5: Erzeugen Sie eine feste Oberfläche für die Injektion und platzieren Sie den Fertigpen.

Drücken Sie die Haut zusammen, um eine feste Oberfläche an der Injektionsstelle zu bilden.

Setzen Sie die gelbe Sicherheitshülse senkrecht auf die zusammengedrückte Haut auf.


Halten Sie die Haut zusammengedrückt, bis die Injektion abgeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass das Sichtfenster zu sehen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie den Fertigpen senkrecht (in einem Winkel von 90 Grad) auf die Injektionsstelle halten.



Schritt 6: Halten Sie den Fertigpen fest gegen die Haut.

Den Fertigpen fest nach unten drücken, bis sich die gelbe Sicherheitshülse nicht weiterbewegt. Den Fertigpen weiter nach unten drücken, nicht anheben.

Die Nadel wird automatisch eingeführt, und die Injektion beginnt. Sie hören oder spüren möglicherweise einen Klick. Halten Sie den Fertigpen senkrecht und fest auf die Haut gedrückt.

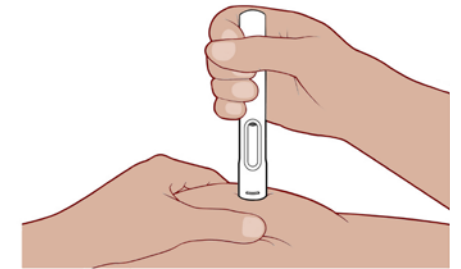

Schritt 7: Drücken Sie den Fertigpen weiter gegen die Haut.

Den Fertigpen weiter nach unten drücken. Warten Sie, bis das Sichtfenster vollständig gelb ist. Es kann bis zu **15 Sekunden** dauern, bis die Injektion abgeschlossen ist. Sie hören oder spüren möglicherweise einen Klick. Wenn das Sichtfenster vollständig gelb ist, heben Sie den Fertigpen von der Haut ab.

